


PROMUEVE EL CUIDADO
DEL MUNDO

Modelo: SW01
MANUAL

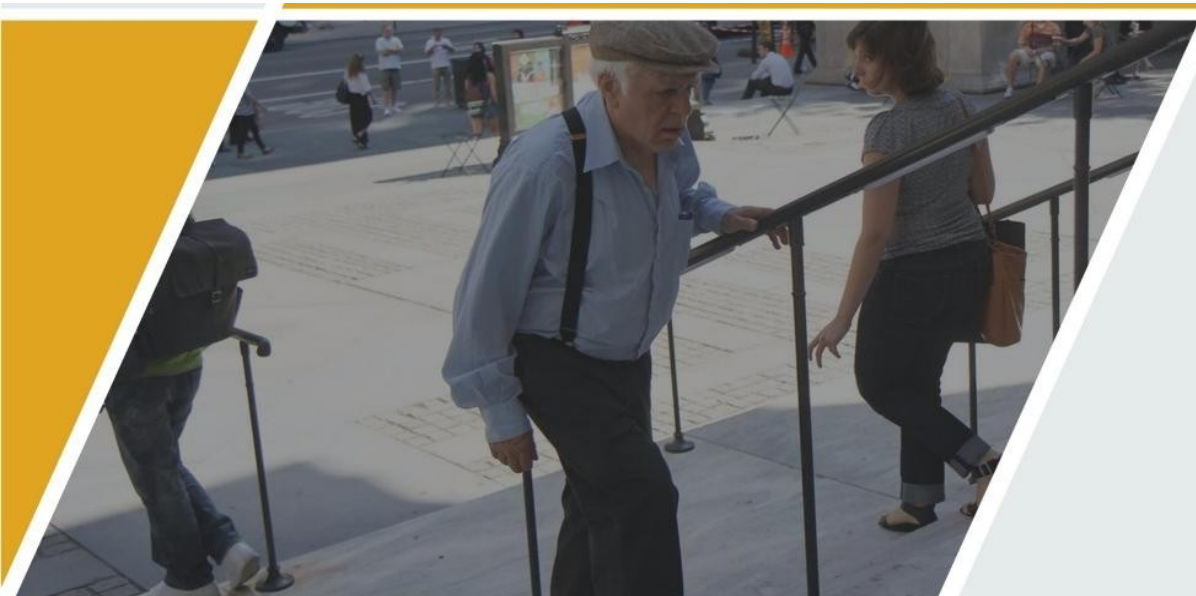

PRODUCTO DESCRIPCIÓN

MOTORIZADO SILLA DE ESCALERA

VISTA GRÁFICA

1. Panel de control

2. Barra de elevación

3. Reposabrazos

4. Cinturones de seguridad

5. Batería de litio

6. Motor

7. Manija delantera

8. Reposapiés

9. 4 Pulgadas Ruedas delanteras

10. 10 Pulgadas Ruedas traseras

11. Frenos

12. Estructura de oruga

13. Manija trasera

14. Perilla roja



MODELO	SW01
Tamaño del producto (L*W*H)	80*64*101/158cm
Tamaño plegado (L*W*H)	105*64*28cm
Tamaño del embalaje (L*W*H)	110*66*31cm
Límite de carga	159kg
P.N.	27kg
P.B.	45kg
Ajuste de altura	101 cm a 158 cm con ajuste de cuatro posiciones de altura
Longitud de la correa de la oruga	78cm
Tamaño de la rueda	4 pulgadas para las ruedas delanteras y 10 pulgadas para las ruedas traseras
Dimensión del asiento	ancho 41cm*profundidad 48cm*altura desde el suelo 52cm
Potencia de salida del motor	120w
Voltaje de salida del motor	20-29.4v
Voltaje adaptable del motor	110-240v
Corriente del motor	13.9A
Voltaje de la batería	24v
Vida útil	3-5 años
El ángulo de la pista	El ángulo de la pista después del respaldo con cuatro posiciones ajuste, adecuado para diferentes pisos.

Prepare la silla de escalera motorizada para uso Comprobación de la carga de la batería

1.Ya sea en la silla de escalera motorizada o cuando se ha retirado, gire el interruptor negro.

- O significa apagado
- ol significa encendido



4.Enchufe el cable de carga y cargue la batería.
5.Cuando la batería esté cargada, retire la carga cable y apriete con los dedos en el sentido de las agujas del reloj.



2.Presione el botón rojo y las luces verdes se iluminarán si hay carga dentro de la ba

- 1 luces=30% de carga
- 2 luces=50% de carga
- 3 luces=100% de carga
- 4 luces=Menos del 10%



6.Retire la silla de escalera motorizada de su almacenamiento ubicación y desabroche la correa mientras sujeta la silla de escalera motorizada en posición plegada.



Cargando la batería:encendida la motorizada escalera silla

3.Desenrosque en sentido antihorario la batería cable de conexión.



7.Tire del asiento de la silla de escalera motorizada hacia abajo hacia el suelo y escuche un clic cuando el asiento se bloquee en posición.



Extending the foot rest

8. Firmly pull the foot rest down into position.



Levantando el trasero para manejar

11. Gire la perilla roja en el sentido de las agujas del reloj para levantar el asa trasera en la parte posterior de la silla de escalera motorizada.



Extender el pistón

12. Empuje la barra inferior con la flecha en blanco hacia adelante en la dirección de la flecha. Esto liberará las pistas del mecanismo de bloqueo.



13. Tire de la barra superior de las orugas hacia atrás hasta que la barra superior de las orugas encajen en la segunda posición de bloqueo.

14. Hay tres agujeros para diferentes ángulos de inclinación para ajustar diferentes escaleras.




15. Pulse el botón rojo en el mango flexible.



Desplegando la silla motorizada de escalera

Liberando la oruga

16. Presione firmemente la pestaña gris encima de la pestaña roja para liberar la oruga.

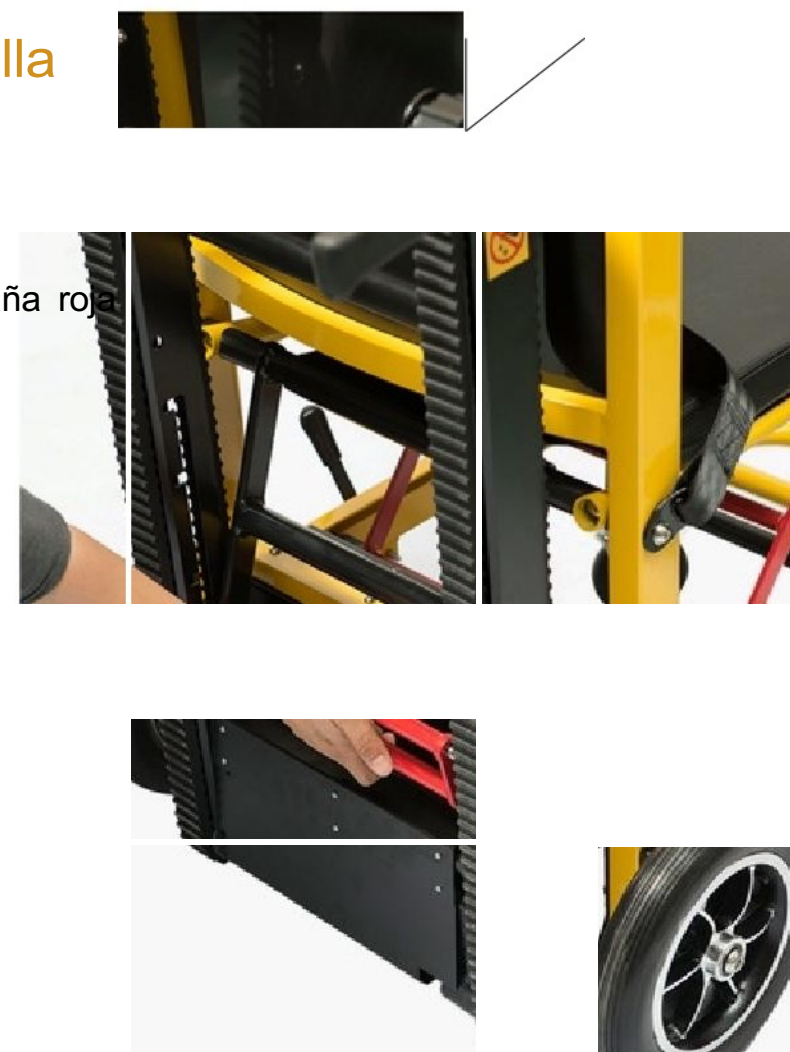

Plegado la silla motorizada de escalera

17. Presione el bloqueo de la barra que tiene el símbolo negro con la mano.

18. Mientras la barra está presionada, empuje el mango lejos del cuerpo y la silla motorizada comenzará a plegarse.



Aplicando los frenos

19. Presione la barra de freno aparte de las ruedas traseras para detener la silla de escalera motorizada.




Control del motor

21. Presione el interruptor negro para controlar el funcionamiento del motor.



Liberando el frenos

20. Empuje la barra de freno hacia las ruedas traseras para que la silla de escalera motorizada se pueda mover de nuevo.

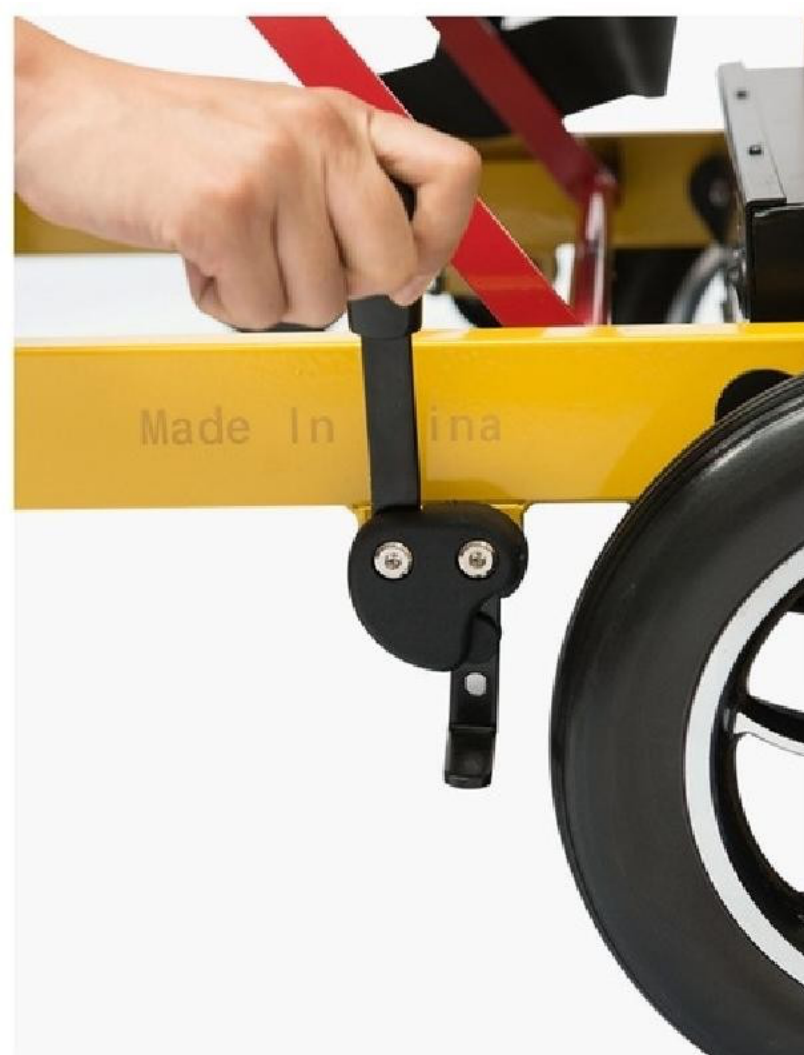

Subiendo escaleras control

22. Encienda el botón rojo cuando la luz roja esté roja, el motor puede funcionar
23. Los dos botones con escaleras, uno significa subir las escaleras y el otro significa bajar las escaleras. La dirección estrecha le mostrará cuál subir y cuál bajar



Fecha de la última revisión: **30/09/2025**

Tabla de símbolos

	Símbolo número de serie
	Símbolo para consultar instrucciones de uso
	Símbolo FABRICANTE. Este símbolo va acompañado del nombre y la dirección del fabricante.
	Símbolo "FECHA DE FABRICACIÓN"
	Identificación Única del Dispositivo
	Símbolo CE
	Símbolo dispositivo médico
	Símbolo del Representante en la Unión Europea, nombre y dirección
	Símbolo de Advertencia
	Símbolo del peso máximo autorizado

FABRICANTE:
Foshan Divous Medical Appliance Co., Ltd
Dirección: 213-214 No. 106 Zidongnan Road Nanzhuang Town,
Chancheng District, Foshan City. China

Representante en la Unión Europea:
SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,2909VA Capelle aan den
IJssel, The Netherlands



Datos del importador:



Guimi Evomedical , S.L.
Av Sant Esteve 157 08211 Castellar del Valles Barcelona (Spain)